

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD

Table des matières

1. Prérequis Covotem.....	2
2. Prérequis DMP (logiciel Efficience lancé par Covotem).....	2
3. Téléchargement du package dmg.....	2
4. Installation	2
5. Démarrage de l'application depuis le dock.....	8
6. Réinstallation	10
7. Désinstallation.....	11

Date	Auteur	Historique	Version
24/12/2020	Dominique GIRAUD	§3. Téléchargement du package dmg : correction de l'URL	2.5

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD

1. Prérequis Covotem

Cliquez [ici](#)

2. Prérequis DMP (logiciel Efficience lancé par Covotem)

Cliquez [ici](#)

3. Téléchargement du package dmg


Télécharger le package .dmg depuis :

➤ <https://www.esante-centre.fr/covotem/Installer/>

covotem-serveur-centre-prod.dmg

4. Installation

Depuis les téléchargements, exécuter covotem-serveur-centre-prod.dmg et double cliquer sur installer :

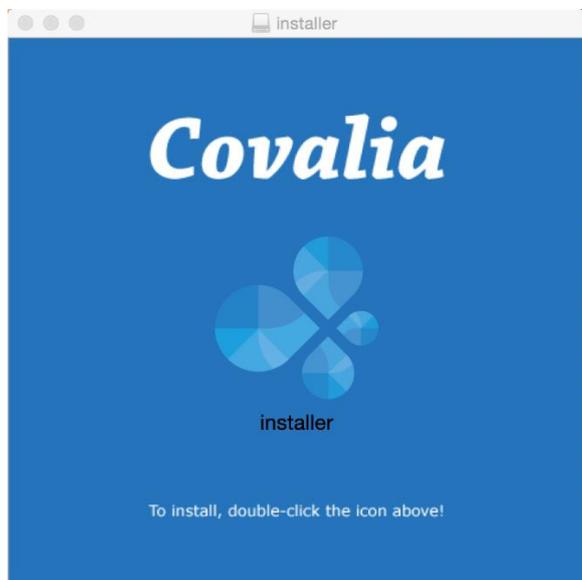

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD



« installer » est une application téléchargée d'Internet. Voulez-vous vraiment l'ouvrir ?

« installer » est sur l'image disque « covotem-serveur-centre-prod.dmg ». Safari a téléchargé cette image disque le 17 septembre 2019 depuis telemedecine-centre.fr.

Ne pas m'avertir lors de l'ouverture d'applications sur cette image disque

Sélectionner Ouvrir pour atteindre l'assistant, cliquer sur suivant et accepter les termes de la licence.

Installation de Covotem
Français
✕

Accord de licence

Ce programme d'installation est distribué sous les termes de la licence GNU Licence Publique Générale en version 3 (GPLv3).

Le code source peut être téléchargé depuis : <https://github.com/covalia/standalone-deployer>

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<https://fsf.org/>>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

J'accepte les termes de la licence

Cliquer sur Suivant jusqu'à atteindre le Type d'installation :

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD


Installation de Covotem
Français
✕

Type d'installation

L'installation simple utilise les paramètres par défaut. L'installation personnalisée vous permet de choisir les dossiers d'installation, de configurer le proxy...

Installation simple
 Installation personnalisée

< Retour
Suivant >

Choisir « Installation personnalisée »

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD


Installation de Covotem
Français
✕

Personnaliser les dossiers d'installation

Répertoire d'installation de l'application

/Users/administrateur/Covotem Autonome V2

Changer

Choisir un dossier personnalisé pour les données

/Users/administrateur/Covotem Autonome V2/data

Changer

< Retour
Suivant >

Ajuster si besoin le répertoire d'installation et dossier d'installation des données, puis suivant.

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD


Installation de Covotem
Français
✕

Configuration du proxy

Utiliser le proxy

Nom d'hôte

Port

Identifiant

Mot de passe

< Retour
Suivant >

Configurer le proxy si besoin.

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD


Installation de Covotem
Français
✕

Lancement

Lancer l'application à la fermeture


< Retour
Installer

Installer

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD


5. Démarrage de l'application depuis le dock

Depuis le répertoire d'installation, aller dans le répertoire loader.

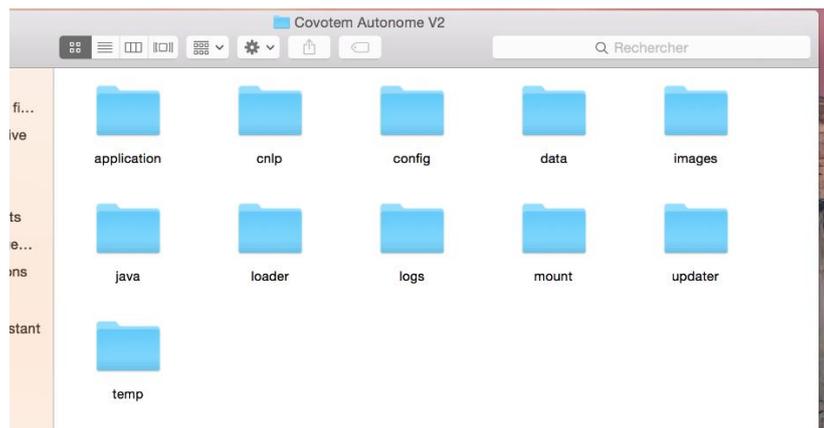

Sélectionner l'icône loader et créer un alias (menu bouton droit ou par le menu Fichier en haut à gauche).

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD

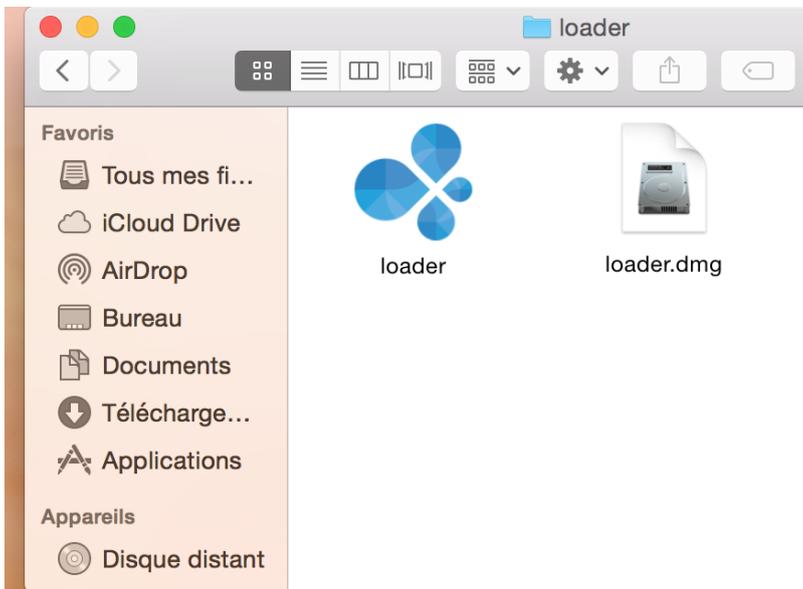

4

Renommer l'alias créé en Covotem Prod par exemple.



Le faire glisser dans le bureau, puis optionnellement depuis le bureau dans le « Dock » en bas à gauche. Dans ce dernier cas, il est possible de supprimer du bureau (pas obligatoire).



Lancer COVOTEM par l'icône .


	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD

6. Réinstallation

Exemple : basculement d'une installation en mode navigateur d'un chariot télémédecine vers le mode autonome

1. Lancer Covotem navigateur
2. Exporter les Préférences machine dans un dossier archive spécifique.

! Le nom n'est pas à renseigner, l'export crée automatiquement un fichier paramClient.xml (non lisible)

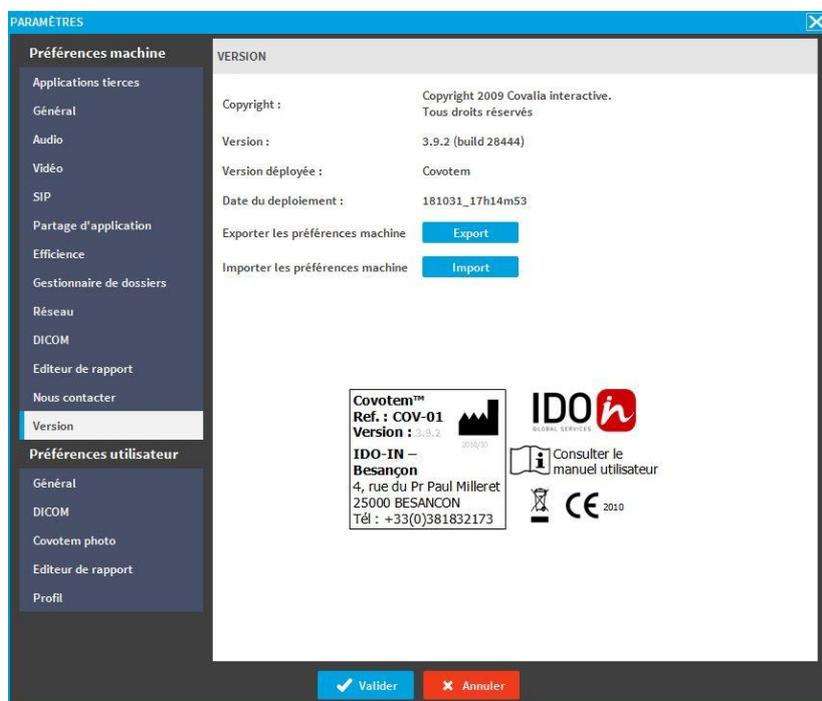

Note : Les préférences utilisateur sont automatiquement sauvegardées sur le serveur et appliquées depuis n'importe quel poste client.

3. Quitter
4. Installer Covotem autonome
5. Importer la configuration matérielle
 - Sélectionner le fichier paramClient.xml depuis le dossier archive.
 - Enregistrer
6. Vérifier la visio

	V2.5	INSTALLATION COVOTEM AUTONOME MAC		
	LE	24/12/2020		
	DESTINATAIRES	GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTE		
	REDACTION			D. GIRAUD

7. Si point 6 OK, Désinstaller le mode navigateur (dans le menu Démarrer 2 items uniquement apparaissent, dans le cas autonome 3 items)

7. Désinstallation

En cas d'installation autonome existante, faire glisser le répertoire d'installation dans la corbeille et effacer l'ancien icon.